

Паровая сауна с ионизацией WELSS WS 7064

Продукция компании WELSS - это ваш собственный косметологический салон!

Благодарим Вас за выбор данного продукта.

Перед началом использования Паровой сауны с ионизацией WELSS WS 7064 внимательно изучите инструкцию по ее применению.

Инструкция по применению

Рекомендации по технике безопасности

Использование данного устройства запрещается:

- В непосредственной близости с водой и в помещениях с повышенной влажностью.
- При повреждении кабеля или разъемов электропитания.
- При ослаблении контакта разъема электропитания устройства и розетки.
- Людям с пониженным порогом тепловосприятия.
- Женщинам во время беременности, периода лактации и менструального цикла.
- Лицам, страдающим аллергическими и кожными заболеваниями.
- Лицам, перенесшим операцию и находящимся в процессе реабилитации.

При подключении устройства к сети не прикасайтесь к металлическим частям разъема электропитания.

По завершению процедур не забудьте отсоединить кабель электропитания.

Запрещено зажимать кабель электропитания и наматывать его вокруг устройства.

Паровая сауна требует бережного использования и хранения.

Не рекомендуется допускать загрязнения или попадание сторонних предметов на контакты разъема кабеля электропитания.

Ни в коем случае не подключайте устройство к сети мокрыми руками.

Устройство необходимо хранить исключительно в сухом, недоступном для детей месте.

Необходима изоляция устройства от легковоспламеняющихся материалов.

При повреждении аппарата категорически запрещается его дальнейшее использование.

Не допускайте засорения барботеров для пара.

Запрещено самостоятельно разбирать и ремонтировать настоящее устройство.

По окончании процедур необходимо подождать 15 минут перед сливом воды. Убедитесь, что устройство отключено от сети.

Во время процедур или в течении 10 минут после окончания использования устройства не рекомендуется наклонять, встряхивать и перемещать сауну.

Во время процедур ни в коем случае не держите устройство в руках, расположите его на плоскую, сухую поверхность.


Не злоупотребляйте чрезмерным использованием настоящего изделия.

Длительность процедуры не должна превышать 10 минут.

Людям с нормальной кожей следует использовать устройство 2-3 раза, а с чувствительной 1 раз в неделю.

При появлении раздражений на коже необходимо сразу же прекратить использование аппарата.

Наименование составных частей изделия

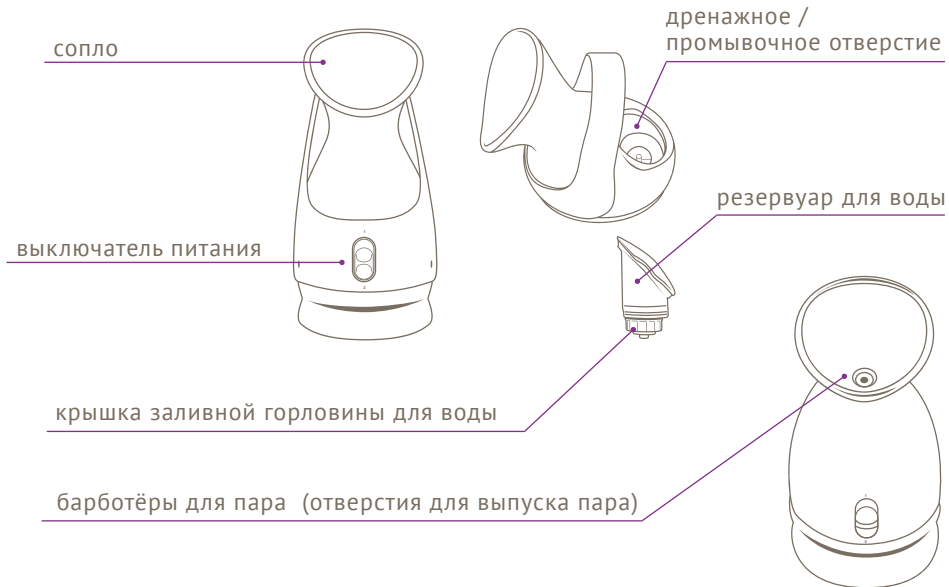

Подготовка перед применением

При открытии упаковки, вы можете обнаружить остатки воды вокруг резервуара для воды, которые являются следствием выполненной на заводе-изготовителе диагностики устройства. Это не является дефектом.

Шаг 1. Установить корпус изделия на плоской сухой поверхности.

Шаг 2. Открыть крышку заливной горловины для воды, добавить воду в бак, а затем плотно закрыть крышку, при этом бак должен быть полностью залит водой. Пар может удерживаться примерно от 8 до 10 минут.

Шаг 3. Вставить резервуар с водой в корпус аппарата. При установке резервуара с водой в корпус аппарата совмещаются плоские поверхности с обеих сторон резервуара и корпуса аппарата. Когда резервуар с водой устанавливается в корпусе аппарата, вода немедленно начинает поступать внутрь корпуса и, соответственно, ее количество в резервуаре уменьшается.

Важно! Для процедур рекомендуется использовать только дистиллированную или очищенную воду. Добавление в воду дополнительных средств (лосьонов, косметических средств или масла) запрещается.

Способы использования паровой сауны с ионизацией WELSS WS 7064

1. Подключите кабель электропитания к сетевой розетке.
2. Передвиньте вверх выключатель питания, в этот момент на распылителе загорится индикатор ярко синего цвета, и примерно через 40 секунд из барботёров пойдет пар. Возможно появление капель горячей воды, это нормальное явление.

Уход за лицом при помощи пара

Во время процедуры расположитесь не менее чем в 20 см. от среза парового сопла для того, чтобы пар гарантировано покрыл всю поверхность лица.

Струя пара появится примерно через 40 секунд после включения устройства.

Когда вода заканчивается, плотность пара будет меняться, это нормальное явление. Если вода в резервуаре закончилась, подача пара прекращается. Рекомендуется выключить подачу электропитания, добавить в резервуар воды, охладить его в течение 10 минут, затем снова добавить воды.

Специальное примечание: Если в емкости для воды аппарата заканчивается вода, то устройство автоматически отключается, термостат к этому времени

уже отключен; в этот момент, если даже сразу добавить воду, аппарат работать не будет, придется подождать около двух минут; после того, как температура устройства понизится, термостат автоматически сбросит данные и сможет снова функционировать. Это нормальная процедура и не указывает на какие-либо неисправности изделия.

После процедуры отключите питание. Выполните основной уход за кожей, в противном случае, происходит быстрое испарение влаги с поверхности кожи, что ведет к ее высыханию.

После процедуры

После каждой процедуры не забудьте слить оставшуюся воду из резервуара и корпуса данного изделия, так как в противном случае, это может привести к появлению нежелательного неприятного запаха.

Необходимо выполнить охлаждение паровой сауны, по крайней мере, в течение 15 минут.

1. Отключить разъем электропитания, отсоединить резервуар подачи воды, слить воду из резервуара и протереть поверхность изделия от воды.
2. Вода сливается через дренажное / промывочное отверстие. Остерегайтесь попадания горячей воды на кожу.

3. Чистый, сухой резервуар для воды необходимо установить в корпус аппарата и вставить его до характерного щелчка.
4. Если корпус данного изделия не используется в течение длительного времени (несколько недель и более), необходимо снять резервуар для воды, насухо протереть корпус устройства и убрать паровую сауну в сухое место.

Чистка и техническое обслуживание устройства

1. Чистка и техническое обслуживание устройства должны производиться примерно один раз в месяц.
2. Если нарушена герметичность крышки резервуара для воды, необходимо указательным пальцем нажать на центральную часть крышки и восстановить ее плавающее состояние.

Технические характеристики

Номинальное напряжение:	220 В, 50 Гц.
Номинальная мощность:	280 Вт.
Температура пара:	Около 40°C на расстоянии около 20 см от источника пара.
Размер:	(в*ш*г): 22,5x10,5x14,3см.
Вес:	650гр.
Режим t°:	5-40°C

Упаковка

Размер упаковки: 25,8x19,2x13,7см

Комплектация: упаковка, устройство, инструкция.

Хранить в недоступном для детей месте.

Гарантийный срок:

12 месяцев со дня покупки

В течение гарантийного периода, все проблемы, имеющие отношение к вопросам качества настоящего изделия, решаются посредством обращения в сервисный центр, с целью получения бесплатного обслуживания на основании гарантийного талона или чека.

Импортер:

ООО «Дэливер», Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 3

Телефон сервисного центра:

+7 (495) 774-57-14

Завод-изготовитель

Shenzhen Wochuan Electronic Co.,Ltd, China/ Вочуань Электроник, Шэньчжэнь, Китай

www.welss.ru





Паровая сауна с
ионизацией
WELSS WS 7064

WS 7064

