

GÉZATONE

ВИБРОМАССАЖЕР ДЛЯ ЛИЦА m 810 Minilift+

ИОНОФОРЕЗ

ВИБРОМАССАЖ

LED ТЕРАПИЯ + ИК



СЕТЬ МАГАЗИНОВ МАССАЖЕРОВ, КОСМЕТИКИ, ТОВАРОВ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

ЛИФТИНГОВЫЙ АППАРАТ ДЛЯ ИОНОФЕРЕЗА С ВИБРАЦИЕЙ, ИК И LED-ТЕРАПИЕЙ MINILIFT+ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ, КАК В МОЛОДОМ, ТАК И В ЗРЕЛОМ ВОЗРАСТЕ. С ЕГО ПОМОЩЬЮ МОЖНО КОРРЕКТИРОВАТЬ ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, КАК КОЖИ ЛИЦА, ТАК И В ЗОНЕ ВОКРУГ ГЛАЗ. ПРОЦЕДУРЫ ПОМОГУТ ПРЕДОТВРАТИТЬ РАННЕЕ УВЯДАНИЕ КОЖИ, ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ТОКСИНОВ И ЛИКВИДИРОВАТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ НОЧНОГО НЕДОСЫПА ИЛИ ДОЛГОГО НАХОЖДЕНИЯ ЗА КОМПЬЮТЕРОМ.



ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
И ПРОФИЛАКТИКА
ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО СТАРЕНИЯ



СНИЖЕНИЕ ТОНУСА, УПРУГОСТИ,
ЭЛАСТИЧНОСТИ И ПЛОТНОСТИ
КОЖИ, МОРЩИНЫ



МОРЩИНЫ В ОБЛАСТИ ГЛАЗ,
ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ



НЕДОСТАТОК ВЛАГИ И
ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ



ОТЕЧНОСТЬ, ПРИПУХЛОСТИ И
КРУГИ ПОД ГЛАЗАМИ



ОТЕЧНОСТЬ, ТУСКЛЫЙ ЦВЕТ
ЛИЦА, УСТАВШАЯ КОЖА

ФУНКЦИИ



СОЧЕТАЯ ИОНОФОРЕЗ, ВЫСОКОЧАСТОТНУЮ ВИБРАЦИЮ, ИК И СВЕТОТЕРАПИЮ, MINILIFT+ КОРРЕКТИРУЕТ ПРОЯВЛЕНИЯ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ, МОДЕЛИРУЕТ ОВАЛ И РЕШАЕТ ПРОБЛЕМЫ ОБЛАСТИ ВОКРУГ ГЛАЗ.

КАЖДЫЙ ИЗ ТРЕХ МЕТОДОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В РАБОТЕ АППАРАТА, ОКАЗЫВАЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА КОЖНЫЕ ПОКРОВЫ.

СУММАЦИЯ ЭФФЕКТОВ ВИБРОМАССАЖА, ИОНОФОРЕЗА, ИК И КРАСНОГО ЦВЕТА ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛУЧИТЬ ВИДИМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ.



Артикул 1301302



ВИБРАЦИЯ /
ВИБРОМАССАЖ



ИОНОФОРЕЗ



ИК



LED
ТЕРАПИЯ

ОСНОВНЫЕ МЕТОДИКИ

ПРИБОР ИСПОЛЬЗУЕТ ВСЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ВИБРАЦИИ, ИОНОФЕРЕЗА И СВЕТОТЕРАПИИ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ВОЗРАСТНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ И ЭСТЕТИЧЕСКИХ НЕДОСТАТКОВ.



Артикул 1301302



ИОНОФЕРЕЗ

- ГЛУБОКОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ И ФОРМИРОВАНИЕ ДЕПО В КОЖЕ.
- СОКРАЩЕНИЕ МОРЩИН
- ПРОТИВООТЕЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ, ДЕТОКС
- ТОНИЗАЦИЯ И СОКРАЩЕНИЕ ПОР
- КОРРЕКЦИЯ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
- УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА
- УВЛАЖНЕНИЕ, НАСЫЩЕНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ.



ВИБРОМАССАЖ

- УСТРАНЕНИЕ СПАЗМА МИМИЧЕСКОЙ МУСКУЛАТУРЫ
- СОКРАЩЕНИЕ МОРЩИН И ПОДТЯЖКА КОЖИ
- ПРОТИВООТЕЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ
- АКТИВИЗАЦИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ И ЛИМФОДРЕНАЖА
- ВЫВЕДЕНИЕ ТОКСИНОВ
- ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА И УПРУГОСТИ КОЖИ.



LED ТЕРАПИЯ + ИК

- СТИМУЛЯЦИЯ СИНТЕЗА КОЛЛАГЕНА
- ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА И УПРУГОСТИ
- СТИМУЛЯЦИЯ РЕГЕНЕРАЦИИ И РЕПАРАЦИИ
- УВЛАЖНЕНИЕ КОЖИ
- АКТИВИЗАЦИЯ ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
- СТИМУЛЯЦИЯ МЕСТНОГО ИММУНИТЕТА
- СНИЖЕНИЕ СПАЗМА МЫШЦ
- ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОСМЕТИКИ

ВИБРОМАССАЖ



ВЫСОКОЧАСТОТНАЯ ВИБРАЦИЯ ОКАЗЫВАЕТ ВЛИЯНИЕ НА МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОЕ РУСЛО, ЛИМФАТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ И КОЖУ.

ПОД ДЕЙСТВИЕМ ВИБРОМАССАЖА УХОДИТ СПАЗМ МИМИЧЕСКОЙ МУСКУЛАТУРЫ, ЧТО ПОМОГАЕТ УМЕНЬШИТЬ МОРЩИНЫ И ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ОБРАЗОВАНИЕ НОВЫХ.

ВИБРАЦИЯ СТИМУЛИРУЕТ ВЫВЕДЕНИЕ ЖИДКОСТИ И ТОКСИНОВ, СОКРАЩАЮТСЯ ОТЕКИ, ЛИЦО СТАНОВИТСЯ СВЕЖИМ, КЛЕТКИ ПОЛУЧАЮТ ДОСТАТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ И КИСЛОРОДА.

10000


КОЛЕБАНИЙ
В МИНУТУ



ПОВЫШЕНИЕ
ТОНУСА
И УПРУГОСТИ



СОКРАЩЕНИЕ
МЕЛКИХ МОРЩИН

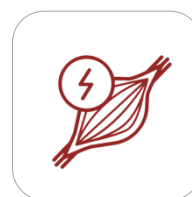


УСТРАНЕНИЕ
СПАЗМОВ МЫШЦ



СТИМУЛЯЦИЯ
КРОВООБРАЩЕНИЯ



АКТИВИЗАЦИЯ
ЛИМФОДРЕНАЖА

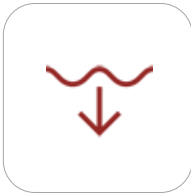

УСИЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ
КОСМЕТИКИ



ДЕТОКСИКАЦИЯ

ИОНОФОРЕЗ



ГАЛЬВАНИЧЕСКИЕ ТОКИ УСИЛИВАЮТ ПРОНИКНОВЕНИЕ В КОЖУ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗАРЯЖЕННЫХ (ИОНИЗИРОВАННЫХ) ПРЕПАРАТОВ, ДАННОЕ ЯВЛЕНИЕ НОСИТ НАЗВАНИЕ ИОНОФОРЕЗА.

ГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ ТОК ПЕРЕВОДИТ ДЕЙСТВУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ КОСМЕТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА В АКТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ, ПОВЫШАЕТ ГЛУБИНУ ИХ ПРОНИКНОВЕНИЯ И ПРОДЛЕВАЕТ ДЕЙСТВИЕ ДО НЕСКОЛЬКИХ ДНЕЙ ЗА СЧЕТ ОБРАЗОВАНИЯ В КОЖЕ «ДЕПО» АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ.


БЛАГОДАРЯ ИОНОФОРЕЗУ «MINILIFT+» ДОСТАВЛЯЕТ ПИТАТЕЛЬНЫЕ, УВЛАЖНЯЮЩИЕ, РЕГЕНЕРИРУЮЩИЕ И ДРУГИЕ, ТАК НЕОБХОДИМЫЕ КОЖЕ КОМПОНЕНТЫ.



УВЛАЖНЕНИЕ
И ПИТАНИЕ КОЖИ




УСИЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ
КОСМЕТИКИ

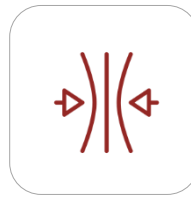


ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА
И УПРУГОСТИ



ВЫРАВНИВАНИЕ
МИКРОРЕЛЬЕФА
СОКРАЩЕНИЕ МОРЩИН

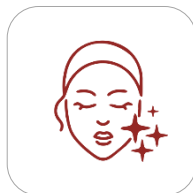

УЛУЧШЕНИЕ
ЦВЕТА ЛИЦА

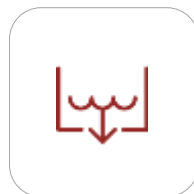

СОКРАЩЕНИЕ
ОТЕЧНОСТИ, ДЕТОКС



УМЕНЬШЕНИЕ
РАСШИРЕННЫХ ПОР



УСКОРЕНИЕ
РЕГЕНЕРАЦИИ

LED ТЕРАПИЯ

КРАСНЫЙ СВЕТ 630 нм

№1 для повышения скорости синтеза коллагена.


СОКРАЩАЕТ МОРЩИНЫ И ПРИЗНАКИ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ, ДЕЛАЕТ КОЖУ БОЛЕЕ ПЛОТНОЙ И УПРУГОЙ.

ПОВЫШАЕТ УРОВЕНЬ УВЛАЖНЕННОСТИ И СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ ВНЕШНИМ СТРЕСС-ФАКТОРАМ, УЛУЧШАЕТ ВОССТАНОВЛЕНИЕ МИКРОПОВРЕЖДЕНИЙ.

МЯГКОЕ ТЕПЛО УСТАРЯЕТ СПАЗМ МИМИЧЕСКОЙ МУСКУЛАТУРЫ И ПРЕПЯТСТВУЕТ ВОЗНИКНОВЕНИЮ МОРЩИН, УЛУЧШАЕТ ПРОНИКНОВЕНИЕ КОСМЕТИКИ.



СТИМУЛЯЦИЯ
СИНТЕЗА КОЛЛАГЕНА

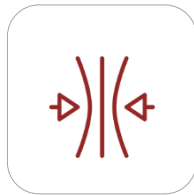

ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА
И УПРУГОСТИ



СТИМУЛЯЦИЯ
РЕГЕНЕРАЦИИ



КОРРЕКЦИЯ
МОРЩИН




УСКОРЕНИЕ
МЕТАБОЛИЗМА



УВЛАЖНЕНИЕ
КОЖИ




СОКРАЩЕНИЕ
РАСШИРЕННЫХ ПОР

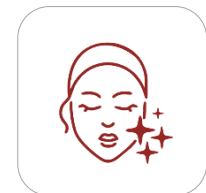

УЛУЧШЕНИЕ
ЦВЕТА ЛИЦА

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- **МАКСИМАЛЬНОЕ УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** У НЕГО ДАЖЕ НЕТ КНОПКИ ВКЛЮЧЕНИЯ. ВСЕ ФУНКЦИИ АКТИВИРУЮТСЯ ПРИ КАСАНИИ ЭЛЕКТРОДОМ КОЖИ.
- **ПОВЫШАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ**
- **КОМФОРТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОМА И В ПОЕЗДКАХ.**
- **ВСЕГДА С СОБОЙ:** ЛЕГКО ПОМЕСТИТСЯ В КОСМЕТИЧКЕ, МОЖНО БРАТЬ С СОБОЙ В ПУТЕШЕСТВИЯ И ДЕЛОВЫЕ КОМАНДИРОВКИ.
- **ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ:** СЕАНС МАССАЖА ЗАНИМАЕТ 10 МИНУТ.
- **ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** НЕ ТРЕБУЕТ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ.
- **ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ:** ПРИОБРЕТАЯ ОДИН «MINILIFT+», ВЫ ПОКУПАЕТЕ 2 ПРИБОРА, И ДЛЯ ЛИЦА И ДЛЯ ГЛАЗ.
- **УСТРОЙСТВО КОМФОРТНО ДЕРЖАТЬ В РУКЕ, «MINILIFT+» ЛЕГКИЙ, КАК ПЕРЫШКО И ВЕСИТ ВСЕГО 29 ГРАММ.**

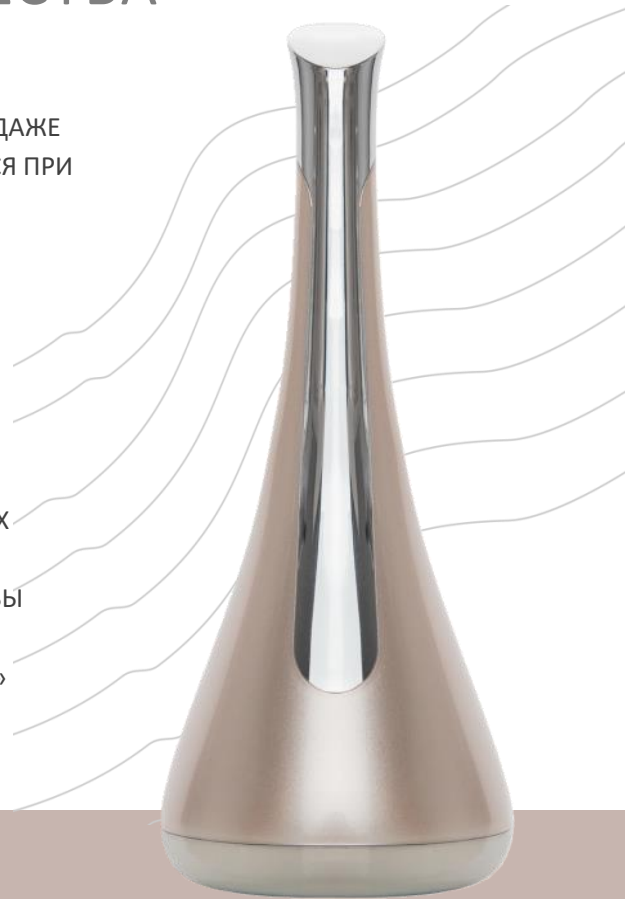

Артикул 1301302



ВКЛЮЧАЕТСЯ ПРИ
СОПРИКОСНОВЕНИИ
С КОЖЕЙ



ВЕС
29 ГРАММ



1 РЕЖИМ
РАБОТЫ



РАБОТАЕТ
ОТ
БАТАРЕЙКИ ААА



1 ЦВЕТ
LED ТЕРАПИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

1 РЕЖИМ РАБОТЫ, 1 ЦВЕТ СВЕТОТЕРАПИИ И ВИБРОМАССАЖ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ЭФФЕКТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА КОЖУ И МЫШЦЫ, А ТАКЖЕ ПОВЫШАЮТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОСМЕТИКИ.



ВИБРОМАССАЖ 10000 КОЛЕБАНИЙ В МИНУТУ

РАЗГЛАЖИВАЕТ МОРЩИНЫ И СОКРАЩАЕТ КОЖНЫЕ ЗАЛОМЫ, ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ГИПЕРТОНУСА МИМИЧЕСКИХ МЫШЦ.

ЭЛЕКТРОД ПЛОТНО СОПРИКАСАЕТСЯ С КОЖЕЙ, ЛЕГКО СКОЛЬЗИТ ПРИ МАССАЖЕ.

МАКСИМАЛЬНО ПРОСТОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ПРИБОР МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ, У НЕГО ДАЖЕ НЕТ КНОПКИ ВКЛЮЧЕНИЯ. ОН НАЧИНАЕТ РАБОТАТЬ ПРИ КОНТАКТЕ С КОЖЕЙ.




ВСЕГДА ПОД РУКОЙ

ПРИБОР ЛЕГКО ДЕРЖАТЬ, ОН ВЕСИТ ВСЕГО 29 ГРАММ, РУКА НЕ УСТАЕТ ВО ВРЕМЯ СЕАНСА. ЛЕГКО ПОМЕЩАЕТСЯ В СУМОЧКЕ, ЕГО МОЖНО ВЗЯТЬ С СОБОЙ НА ОТДЫХ ИЛИ В КОМАНДИРОВКУ, ЧТОБЫ НЕ ПРЕРЫВАТЬ КУРС ПРОЦЕДУР.

ДВА ЭЛЕКТРОДА

2 ЭЛЕКТРОДА РАЗНОЙ ПЛОЩАДИ ДЛЯ ЛИЦА И ОБЛАСТИ ГЛАЗ. ДЛЯ ЛИЦА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЭЛЕКТРОД С БОЛЬШОЙ ПЛОЩАДЬЮ КОНТАКТА, ДЛЯ ГЛАЗ – МАЛЕНЬКИЙ ЭЛЕКТРОД НА ПРОТИВОПОЛОЖНОМ КОНЦЕ ПРИБОРА.

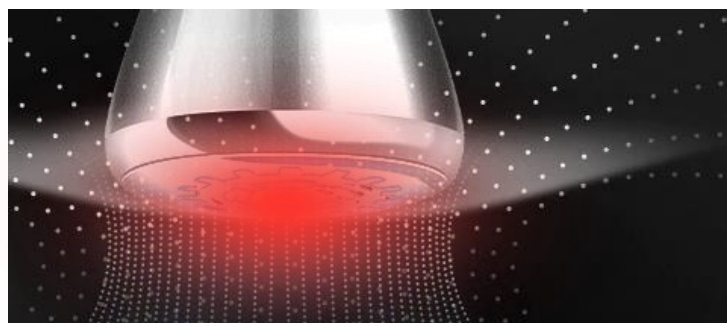

ВНЕШНИЙ ВИД АППАРАТА



Артикул 1301302



29



ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ



ВЕС
29 грамм



РАБОТАЕТ ОТ
БАТАРЕЙКИ ААА
(в комплект не входит)

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ



1

УДАЛИТЕ
МАКИЯЖ



2

СМОЙТЕ ОСТАТКИ
ДЕМАКИЯЖНОГО СРЕДСТВА



3

НАНЕСИТЕ НА КОЖУ
АППАРАТНОЕ
КОСМЕТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО



4

ДЛЯ НАЧАЛА ПРОЦЕДУРЫ И
ВКЛЮЧЕНИЯ ПРИБОРА ПЛОТНО
ПРИСЛОНИТЕ ЭЛЕКТРОД К КОЖЕ,
НЕ ОКАЗЫВАЯ СИЛЬНОГО
ДАВЛЕНИЯ. ПРОВЕДИТЕ МАССАЖ
ПО МАССАЖНЫМ ЛИНИЯМ.



5

УДАЛИТЕ ОСТАТКИ
АППАРАТНОГО СРЕДСТВА,
ПРОТРИТЕ ЛИЦО
ТОНИКОМ, НАНЕСИТЕ
МАСКУ.



6

ЗАВЕРШИТЕ ПРОЦЕДУРУ
НАНЕСЕНИЕМ СЫВОРОТКИ
И КРЕМА ПО ТИПУ КОЖИ.



СЕАНСЫ ПРОВОДЯТСЯ ЧЕРЕЗ ДЕНЬ, ИНТЕНСИВНЫЙ КУРС СОСТАВЛЯЕТ НЕ МЕНЕЕ 20 ПРОЦЕДУР.


РЕЗУЛЬТАТЫ*



КУРС ОМОЛАЖИВАЮЩИХ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ СЕАНСОВ ДЛЯ КОЖИ ЛИЦА И ЗОНЫ ВОКРУГ ГЛАЗ ОБЕСПЕЧИТ ВИДИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ЗАМЕДЛЯЯ УВЯДАНИЕ И ИЗБАВЛЯЯ ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ ВНЕШНИХ ВЛИЯНИЙ И СТРЕССА. ЛИЦО СТАНОВИТСЯ СВЕЖИМ, КОЖА ИЗБАВЛЯЕТСЯ ОТ ТОКСИНОВ, УМЕНЬШАЕТСЯ ОТЕЧНОСТЬ. УСТРАНЯЯ СПАЗМ МИМИЧЕСКИХ МЫШЦ, ПРИБОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ОБРАЗОВАНИЕ НОВЫХ МОРЩИН, КАК В ОБЛАСТИ ГЛАЗ, ТАК И В ОБЛАСТИ ЛИЦА.



ПОВЫШЕНИЕ
ТОНУСА
И УПРУГОСТИ КОЖИ

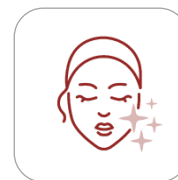

УЛУЧШЕНИЕ
ЦВЕТА ЛИЦА



СОКРАЩЕНИЕ ОТЕКОВ
И МОРЩИН
В ОБЛАСТИ ГЛАЗ



ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
КОСМЕТИКИ




УВЛАЖНЕНИЕ И
ПИТАНИЕ КОЖИ



ВЫРАВНИВАНИЕ
МИКРОРЕЛЬЕФА



КОРРЕКЦИЯ
МОРЩИН И
ВОЗРАСТНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ

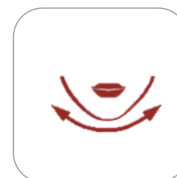

МОДЕЛИРОВАНИЕ
ОВАЛА ЛИЦА



СОКРАЩЕНИЕ
ОТЕКОВ И
ДЕТОКСИКАЦИЯ

** Результаты зависят от исходного состояния кожи, возраста и могут быть достигнуты только при проведении курса процедур*

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ



- ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
- ДЕРМАТИТЫ, ДЕРМАТОЗЫ РАЗЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ЭКЗЕМЫ, ПСОРИАЗ И ДР..
- АКНЕ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ, ГНОЙНИЧКОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ
- РАЗЛИЧНЫЕ ТРАВМЫ КОЖИ: ЦАРАПИНЫ, ПОРЕЗЫ, ГЕМАТОМЫ, ОЖОГИ (В ТОМ ЧИСЛЕ СОЛНЕЧНЫЕ ОЖОГИ)
- НАЛИЧИЕ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ НА КОЖЕ В МЕСТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБОРА
- НЕВРАЛГИЯ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА
- БЕРЕМЕННОСТЬ
- ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА, ЭПИЛЕПСИЯ
- НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОСЛЕ ТРАВМИРУЮЩИХ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР.
- НЕ РЕКОМЕНДОВАНЫ СЕАНСЫ МАССАЖА ПРИ БОТОКСЕ
- НЕПЕРЕНOSИМОСТЬ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ТОКОВ.
- АРИТМИИ, НЕДОСТАТОЧНОСТЬ КРОВООБРАЩЕНИЯ, ПАТОЛОГИИ СЕРДЦА И СОСУДОВ, НАРУШЕНИЕ СВЕРТЫВАЕМОСТИ КРОВИ. НОШЕНИЕ КАРДИОСТИМУЛЯТОРА И ДРУГИХ ЭЛЕКТРОННЫХ ИМПЛАНТОВ
- САХАРНЫЙ ДИАБЕТ
- НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ АППАРАТ ПРИ НАЛИЧИИ ПОДКОЖНЫХ ИМПЛАНТАТОВ В ОБЛАСТИ ПРОЦЕДУРЫ (ЗОЛОТЫЕ НИТИ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СКОБКИ). ЗУБНЫЕ КОРОНКИ, ШТИФТЫ И БРЕКЕТЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ.
- НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВОДИТЬ ПРОЦЕДУРУ ПРИ ГРИППЕ, ОРВИ, ОБОСТРЕНИИ ГЕРПЕСА И ЛИХОРАДОЧНЫХ СОСТОЯНИЯХ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



РАБОТАЕТ ОТ 1
БАТАРЕЙКИ



ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Артикул 1301302

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ (в комплект не входит)	1 БАТАРЕЙКА ААА
ЧАСТОТА ВИБРАЦИИ	10000 колебаний/минуту
КОЛИЧЕСТВО РЕЖИМОВ	1
КОЛИЧЕСТВО ЦВЕТОВ LED ТЕРАПИИ	1
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	98,5x39,5 диаметр 39,5 мм
ВЕС ПРИБОРА БЕЗ УПАКОВКИ	29 грамм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Прибор Gezatone, m810 -1 шт.

Руководство по эксплуатации – 1

Упаковочная коробка – 1