

## Поздравляем Вас с приобретением массажного коврика Impulse Pad!

Внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации перед началом использования. Сохраните это руководство для получения необходимых сведений в будущем.

Гарантийный талон находится в настоящем руководстве по эксплуатации. При покупке требуйте правильного его заполнения: проставления печати продавца и даты продажи.

### ПРИНЦИП РАБОТЫ

В массажном коврике Impulse Pad используется технология электрической стимуляции мышц (EMS). Это сокращение мышц с помощью электрических импульсов, которые воздействуют на сенсорные нервные окончания, что способствует снятию болевого синдрома. Сокращение мышц приводит к устранению мышечных спазмов, улучшению кровотока и лимфотока. Электростимуляция мышц оказывает положительное влияние при растяжении и восстановлении после повышенной мышечной нагрузки, а также при симптомах мышечной усталости.

#### Для чего используется EMS:

- укрепление мышц,
- предотвращение мышечной атрофии,
- улучшение кровотока и лимфотока,
- расслабление мышц,
- устранение отеков,
- активизация обменных процессов,
- устранение мышечных спазмов,
- снятие усталости, стресса,
- общеукрепляющее действие.

С помощью Impulse Pad можно проводить процедуры рефлексотерапии стоп, оказывая стимулирующее действие на рефлекторные точки стопы. Благодаря активизации акупунктурных точек массажный коврик улучшает не только состояние ног, но и оказывает общеукрепляющее воздействие на весь организм в целом.

### ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ


- Используйте только аксессуары, которые идут в комплекте с Impulse Pad.
- Не используйте устройство в местах с высокой влажностью, таких как ванная комната.
- Если не собираетесь использовать устройство в течение длительного времени, достаньте батареи из пульта дистанционного управления.
- Если устройство неисправно, отсоедините его от источника питания и обратитесь в сервисную службу. Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, это приведет к аннулированию гарантии.
- Не допускайте контакта устройства с металлическими предметами, такими как пряжка ремня или украшения.

### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Беременность.
- Тромбоз глубоких вен во избежание образования сгустка.
- Имплантированный кардиостимулятор или автоматический дефибриллятор сердца.
- Наличие медицинских искусственных частей ног, имплантов или штифтов.
- Злокачественные образования.
- Нарушение целостности кожных покровов.
- Индивидуальная непереносимость электрических импульсов.
- Не рекомендуется проводить процедуры при гриппе, ОРВИ и повышенной температуре.

Портативный EMS-массажер IMPULSE PAD имеет сертификат массажного бытового электрического прибора для тела и не является медицинским.

### ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

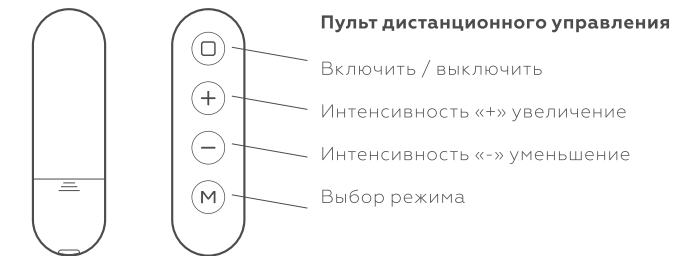


### Как поставить батарейку CR2032 в дистанционное управление



### ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЗАРЯДКА

- Подключите модуль управления через USB-кабель для зарядки (входит в комплект).
- Подключите USB-кабель с адаптером постоянного/переменного тока (не входит в комплект) в розетку.
- В течение зарядки на модуле управления будет гореть красный светодиодный индикатор и погаснет, когда зарядка будет завершена.

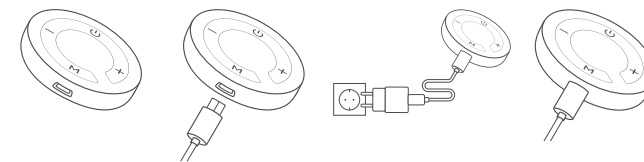

### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Impulse Pad имеет 2 режима работы, которые переключаются с помощью кнопки «М» на модуле управления или пульте дистанционного управления. Цветовая индикация режимов – белый и зеленый.

Регулировка интенсивности происходит с помощью кнопок «+» и «-». Уровни интенсивности варьируются от 1 до 15.



25-минутная автоматическая программа постепенно увеличивает интенсивность массажа во время сеанса и автоматически останавливается после завершения сеанса.



## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Не надевайте носки или обувь при использовании массажного коврика, в противном случае вы не почувствуете электрические импульсы.
- Поставьте босые ноги на правую и левую сторону коврика. В таком положении они должны находиться во время проведения процедуры.
- Рекомендуется помыть или намочить ноги перед использованием массажного коврика. Сухие ноги могут не ощущать электрические импульсы из-за высокого сопротивления.

### Перед использованием

- Поместите модуль управления на массажный коврик, затем убедитесь, что ваши ноги расположены на левой и правой стороне коврика.
- Нажмите кнопку Вкл/Выкл на модуле управления, чтобы включить устройство или сделайте это с помощью кнопки Вкл/Выкл на пульте дистанционного управления.
- Выберите подходящий режим работы с помощью кнопки выбора режима на модуле управления или пульте дистанционного управления.
- Отрегулируйте необходимый уровень интенсивности с помощью кнопок «+» и «-» на модуле управления или пульте дистанционного управления.

### Примечания

- При включении массажного коврика модуль управления запускается с Уровня 1 в Режиме 1.
- Если при работающем устройстве вы убрали ноги с коврика, то уровень интенсивности автоматически снижается до Уровня 1.
- Делайте 1 сеанс в день.
- Пульт дистанционного управления позволяет расслабиться при проведении сеанса без необходимости наклоняться, чтобы управлять устройством.

## СОСТОЯНИЕ СВЕТОДИОДНОЙ ИНДИКАЦИИ

| Функции              | Действия | Состояние светодиодной индикации  |
|----------------------|----------|-----------------------------------|
| Включить / Выключить | Нажмите  | Включить / Выключить              |
| Увеличить «+»        | Нажмите  | Мигает один раз                   |
| Уменьшить «-»        | Нажмите  | Мигает один раз                   |
| Выбор режима         | Нажмите  | Изменение цвета (белый / зеленый) |
| Заряжается           | —        | Красный                           |
| Зарядка завершена    | —        | Белый                             |
| Не заряжается        | —        | Мигает                            |

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Функция                   | EMS-массажер для ног  |
| Источник питания          | Аккумуляторная батарея USB, 3,7 В   |
| Частота                   | 4-35 Гц / 4-41 Гц (с изменением частоты)  |
| Уроки интенсивности       | 15  |
| Автоматическое отключение | 25 минут  |
| Размер блока              | Ø 4,2 x 1,4 см  |
| Комплектация              | 1 x модуль управления<br>1 x массажный коврик<br>1 x USB-кабель для зарядки<br>1 x пульт дистанционного управления<br>1 x руководство по эксплуатации |

## ГАРАНТИЯ

Гарантия на прибор — 12 месяцев с даты покупки. Гарантия распространяется на прибор только при условии его правильной эксплуатации, без наличия механических и других повреждений. Прибор не подлежит гарантийному обслуживанию в случае попадания влаги внутрь изделия, а также при признаках ремонта изделия посторонними лицами. Пожалуйста, сохраняйте документы о покупке и настоящую инструкцию до окончания гарантийного срока.

Настоящим я подтверждаю, что приобрел портативный EMS-массажер для ног Impulse Pad в полном комплекте и пригодным к эксплуатации.

С условиями гарантии согласен:

ФИО покупателя \_\_\_\_\_

Дата покупки \_\_\_\_\_

Печать продавца \_\_\_\_\_


[www.impulse-device.ru](http://www.impulse-device.ru)

Изготовлено по заказу и под контролем ООО «Шантарам».  
Произведено в Китае.



# IMPULSE

Приборы нового поколения  
для здоровья

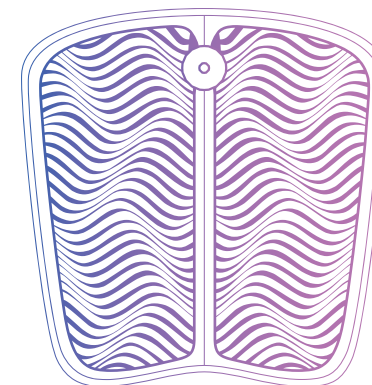

## IMPULSE PAD

ПОРТАТИВНЫЙ EMS-МАССАЖЕР  
ДЛЯ НОГ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ