


Инструкция по эксплуатации

Уважаемый покупатель,
благодарим Вас за покупку Универсальной массажной подушки «Profi»!

1. ОПИСАНИЕ

- 1 – Основной прибор (электронный блок)
- 2 – Кнопка питания / переключения режимов работы
- 3 – Массажные ролики
- 4 – Ремень для фиксации прибора
- 5 – Застежка молния
- 6 – Разъем питания прибора
- 7 – Адаптер питания от электросети
- 8 – Адаптер питания от бортовой сети автомобиля
- 9 – Руководство по эксплуатации

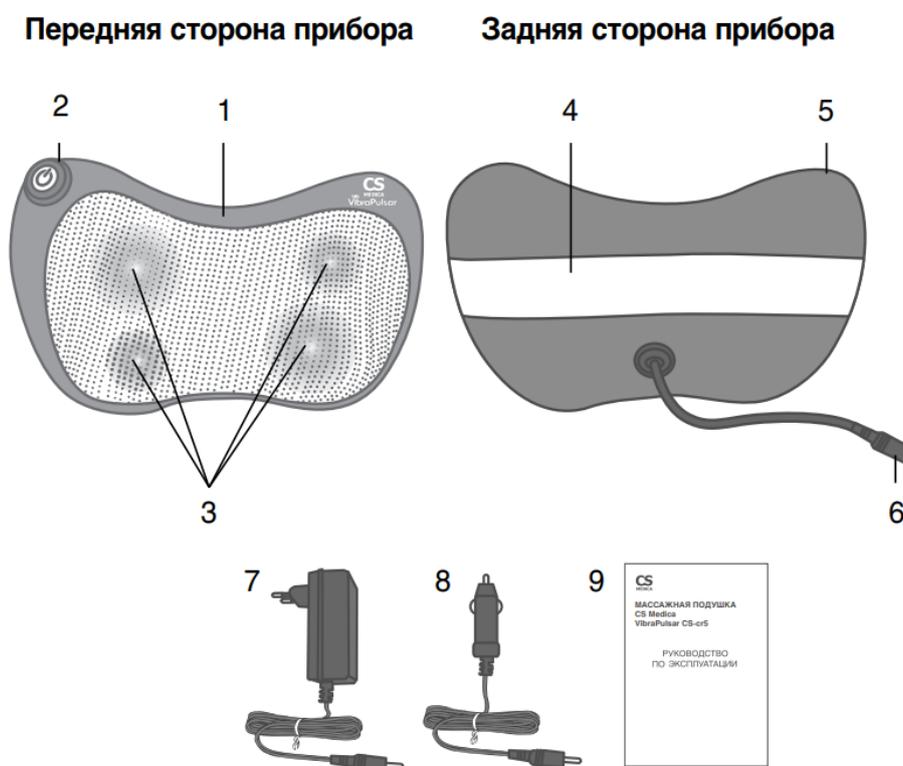

Управление работой массажной подушки происходит путём поочередного нажатия кнопки «on/off» в зависимости от предпочитаемого режима работы.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Эффективный разминающий массаж. Восемь массажных роликов оптимального размера и формы, совершая круговые движения в двух направлениях, имитируют древнейшую технику массажа «Шиatsu».

Дополнительная тепловая стимуляция усиливает общее действие массажа, прогревая и расслабляя ткани и мышцы, позволяет добиться еще более выраженного эффекта от применения массажной подушки.

Небольшой вес и эргономичная форма, система управления одной кнопкой, наличие ремня для фиксации к креслу или сиденью автомобиля, увеличенная длина шнура питания прибора, позволяют комфортно проводить массаж всего тела под любым углом и без помощи других лиц.

В комплект поставки также входит адаптер питания от бортовой сети автомобиля, что позволяет использовать прибор не только дома и на работе, но также в автомобиле.

3. ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед каждым использованием необходимо убедиться, что прибор и его компоненты не повреждены.
- Прежде, чем подключить прибор к электросети, убедитесь в том, что напряжение в сети соответствует значениям, указанным на приборе.
- Не оставляйте прибор без присмотра, если рядом находятся дети.
- Во избежание поражения электрическим током, никогда не погружайте прибор, а также сетевой шнур или штекер питания в воду или иную жидкость.
- Ни в коем случае нельзя пользоваться прибором в ванной, под душем, а также в помещениях с повышенной влажностью.
- Всегда отключайте прибор от электрической сети сразу после каждого использования и только сухими руками.
- Не используйте массажную подушку на открытом воздухе.
- Не рекомендуется пользоваться массажной подушкой во время движения автомобиля.
- Не используйте прибор под одеялом или подушкой. Не накрывайте прибор во время его использования, перегрев прибора может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Во избежание нежелательного перегрева прибора, длительность непрерывной работы должна составлять не более 15 минут за сеанс. По завершении сеанса прибор выключится автоматически. Перед следующим сеансом необходимо сделать 10–15 минутный перерыв для полного охлаждения прибора.
- Соблюдайте следующие правила обращения с сетевым шнуром и адаптером питания от прикуривателя автомобиля:
 - не растягивайте, не сгибайте и не перекручивайте шнур.
 - не вносите изменения в конструкцию шнура.
 - не кладите тяжелые предметы на сетевой шнур.
 - не используйте сетевой шнур с поврежденным проводом или штекером.
 - не пользуйтесь неисправным гнездом питания.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание: от сети, от прикуривателя в автомобиле

Напряжение на входе: 100-240 В/50-60 Гц

Напряжение на выходе: 12 В, 2 А. От прикуривателя - 12 Вт

Мощность: 20 Вт

Размер изделия в см – 31,5*8,5*18. Вес – 918

Длина шнура с адаптером от сети – 1,2 м. Длина шнура от автомобильного прикуривателя – 1,2 м

5. ПРАВИЛА УХОДА И ХРАНЕНИЯ

Возможна только поверхностная чистка массажной подушки сухой тряпкой, не снимая чехол.

Не погружать массажную подушку в воду. Не использовать чистящие средства. Не протирать влажной тряпкой. Хранить массажную подушку в сухом месте.